

Instructions de pose en méthode NEW CLASSIC

Cette procédure prend environ 10 minutes.

Suivez strictement nos instructions pour les meilleurs résultats.

Note: ne pas effectuer de pose sur une prothèse dentaire

- Tous les composants doivent être facilement accessibles sur une table à portée de main. Effectuez toujours les poses dans un endroit très bien éclairé, la tête sera penchée en arrière de manière à placer le bijou sur une surface horizontale ou bien la personne sera allongée.
- Utiliser toujours une nouvelle paire de gants et un nouveau masque pour chaque client. Recouper les rouleaux de coton en 3.
- Assurez-vous que vous êtes d'accord avec votre client sur la dent où doit être placé le bijou. Une fois en place, le bijou ne pourra pas être déplacé.
- Placer le bijou au bout d'un Waxpicker et mettre en attente sur le plateau de manière accessible.
- Appliquer un rouleau salivaire sec sous la lèvre au-dessus de la dent. Cela doit empêcher la lèvre d'humidifier la dent et dégager l'aire de travail. Nettoyer maintenant la dent entière en frottant un rouleau salivaire à peine humide de haut en bas.

PROTOCOLE OPERATOIRE

PRECAUTION IMPORTANTE : Ne pas saisir le bijou avec les doigts afin d'éviter de le salir, cela pourrait être préjudiciable à la qualité du collage. En cas de besoin, dégraisser le bijou avec de l'alcool à 70° avant de procéder à son collage. En utilisant un Waxpicker pour le manipuler, vous éviterez facilement ce problème.

PREPARATION DE LA ZONE À TRAITER

La zone doit être impérativement préparée à l'aide de PRIME-DENT ETCHANT LIQUID (ce produit contient de l'acide orthophosphorique à 38%).


- Prendre un rouleau de coton humide et nettoyer la dent en frottant de haut en bas.
- Appliquer PRIME-DENT ETCHANT LIQUID sur la zone à traiter à l'aide d'une multibrush.
Une fine couche de PRIME-DENT ETCHANT LIQUID suffira pour réaliser le traitement.

La surface à traiter doit être largement supérieure à la surface du bijou.
Laisser agir 30 secondes maximums.

- Enlever PRIME-DENT ETCHANT LIQUID avec un rouleau de coton sec puis, avec un coton très mouillé (l'eau de rinçage doit ruisseler), nettoyer pendant 10 secondes en tamponnant. Faire attention à ne pas mettre de PRIME-DENT ETCHANT LIQUID sur les dents voisines ni sur la gencive.

Sécher parfaitement la surface avec un coton sec.



Il doit apparaître une surface blanche et mate, à la texture crayeuse. Si vous n'obtenez pas ce résultat, recommencer l'opération.

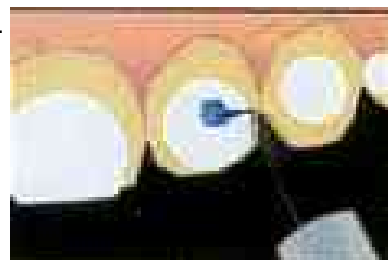

COLLAGE

- I. Dans une alvéole, verser une petite goutte de BASE d'un côté et de l'autre côté une de CATALYST, **mélanger très rapidement** avec la multibrush. **C'est le moment d'enchaîner très vite les étapes suivantes car le mélange va durcir très vite**
- II. Prélever **très vite** une goutte de mélange avec la multibrush.

- III. Appliquer ***immédiatement*** une goutte de mélange sur la surface crayeuse de la dent sans l'étaler. Attention à la grosseur de la goutte, ne pas noyer le bijou dans une goutte trop importante, cela ternira son éclat. Faire une goutte plus petite et rajouter du mélange tout autour du bijou avec la multibrush.

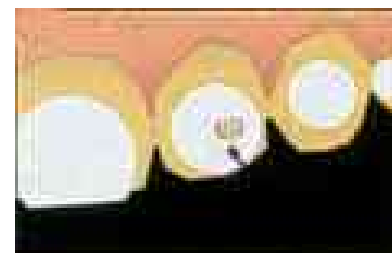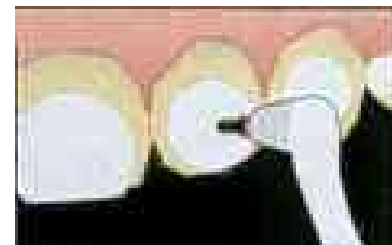


MISE EN PLACE DU BIJOU

Sans attendre, saisir le Waxpicker muni du bijou et mettre en place le bijou dans la goutte de mélange.

Faites rouler le Waxpicker entre vos doigts afin de le décoller du bijou.

A l'aide de la sonde, replacer le bijou si besoin et s'assurer qu'il est bien serti par le mélange, sinon rajouter rapidement avec une multibrush un peu de mélange tout autour afin d'assurer le sertissage du bijou.

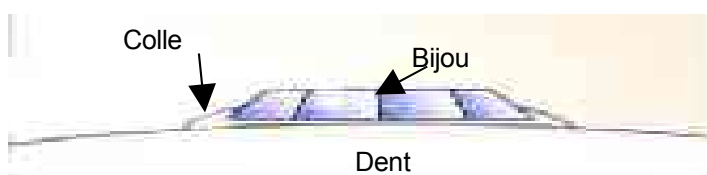

La colle va durcir en 20 secondes environ.

Attendre 3 minutes et rincer parfaitement la surface de la colle avec un bout de rouleau salivaire, enlever le rouleau sous la lèvre et la pose est terminée.

Demander à votre client de ne pas manger et boire tout de suite après la pose. Après quelques heures de précaution, le bijou est solidement fixé, le client peut reprendre ses habitudes mais doit toujours ménager son bijou pour qu'il dure longtemps.

PRECAUTIONS D'USAGE

- Les liquides catalyseur et base peuvent causer des irritations. Se laver les mains après utilisation.
- Ne pas mettre en contact le liquide ETCHANT avec les tissus oraux, la peau. ETCHANT contient de l'acide phosphorique, en cas de contact avec les tissus oraux, la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau, faites appel à un médecin si nécessaire.
- Pour allonger la durée de vie des produits de collage, conservez-les dans un endroit frais à 22°C maxi. Les produits doivent être utilisés à température ambiante.
- Ne pas stocker le kit auprès d'une source de chaleur ou d'une lumière intense.
- Ne pas mélanger les bouchons et ne jamais contaminer le liquide base avec le liquide catalyseur, il s'ensuivrait un durcissement prématuré des produits.

GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU DISTRIBUTEUR

L'aide technique fournie par le distributeur est destinée à aider les utilisateurs à mettre en œuvre le produit.

Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas l'utilisateur de la responsabilité de tester les produits distribués par le distributeur afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. L'utilisateur accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.

En cas de vice du matériau, la responsabilité du distributeur est limitée au remplacement du produit défectueux.

Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à la société. En aucun cas, le distributeur ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

